

# Como fazer um teste de COVID19

usando o *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test*


## SUMÁRIO

Este é um guia simplificado do kit *QuickVue At-Home OTC COVID19 Test*.

Para obter informações completas, consulte a **Folha de instruções** e a **Ficha de informações para o paciente** no kit. A FDA autorizou o uso emergencial deste produto.



Para assistir um vídeo sobre como fazer o teste, visite [quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

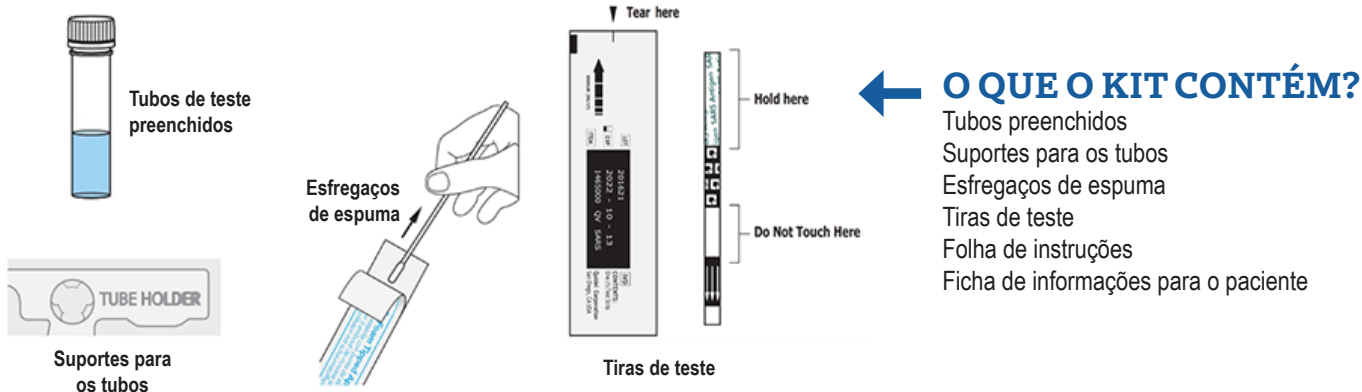

## O QUE MAIS VOCÊ PRECISA?

Relógio ou timer (temporizador), não incluído  
É importante medir o tempo com exatidão neste teste!



## PARA INICIAR O TESTE


Lave suas mãos e coloque o kit sobre uma **superfície plana e limpa**. Certifique-se de que haja **boa iluminação** na sala. Se estiver fazendo o teste em outra pessoa, use uma **máscara facial**. Abra o kit e certifique-se de que todos os itens listados acima estejam presentes. **Pegue o seu relógio ou timer (temporizador)** e siga as **instruções passo-a-passo** no verso.



# Como fazer o teste

1

Tire a tampa de um dos tubos e coloque-o no suporte do tubo.

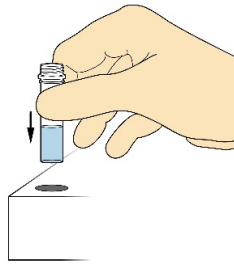

NÃO TOQUE NA PONTA DO ESFREGAÇO.


2

Tire o invólucro do esfregaço. Não toque na ponta do esfregaço.




3

Insira o esfregaço cerca de 12 mm a 20 mm ( $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  pol.) em uma narina e esfregue-o ao redor das paredes internas pelo menos 4 vezes. **Usando o mesmo esfregaço**, repita na outra narina. Isto levará cerca de 15 segundos.

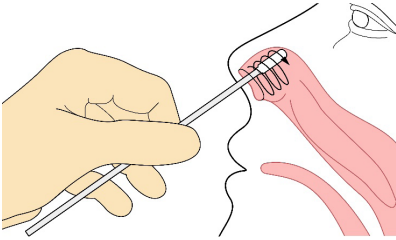


4

Logo após retirar a amostra do nariz, coloque o esfregaço no tubo aberto. Certifique-se de que o esfregaço esteja tocando o fundo do tubo. Agite o esfregaço 3 ou 4 vezes.

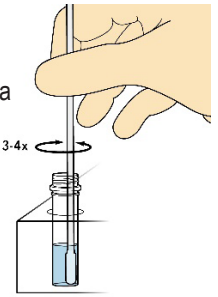


5

Deixe o esfregaço no tubo **por pelo menos 1 minuto**. (Marque o tempo com o relógio ou timer!) Podem ocorrer resultados errados se você deixar o esfregaço dentro do tubo por um tempo muito curto ou muito longo.

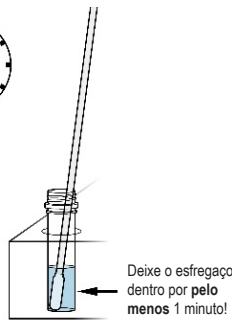

6

Após 1 minuto, retire o esfregaço do tubo, **esfregando a ponta do esfregaço na parede do tubo para extrair o máximo de líquido possível**. Jogue o esfregaço fora.

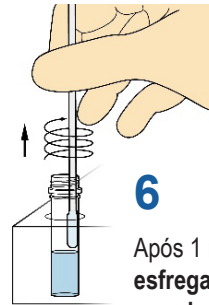

7

Abra cuidadosamente o envelope da tira de teste e coloque a tira de teste no tubo aberto com as **setas apontando para baixo**. Deixe a tira no tubo por **10 minutos**. (Use o timer ou relógio!)




Deixe a tira dentro por pelo menos 10 minutos.




8

Após os 10 minutos, retire a tira de teste do tubo e coloque-a em uma superfície plana com boa iluminação. **Leia o resultado na tira de teste imediatamente!** Se esperar mais de 5 minutos para ler, os resultados poderão ser errados ou inválidos.

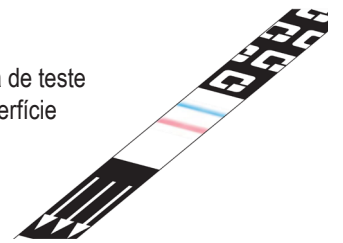

## Como ler o resultado do teste

Existem 3 tipos de resultado de teste possíveis: **Positivo**, **Negativo** ou **Inválido**, um teste que não pode ser usado.

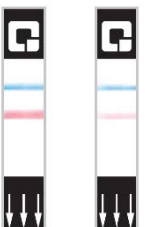

**RESULTADO POSITIVO = 1 linha rosa + 1 linha azul**  
É provável que você tenha a COVID19. **Você deve autoisolar-se**. Se tiver sintomas que o incomodem ou o preocupem, entre em contato com o seu médico.



**RESULTADO NEGATIVO = 1 linha azul**  
Provavelmente você **não** tem COVID19. Mas se tiver sintomas que o incomodem ou o preocupem, entre em contato com o seu médico.



**RESULTADO INVÁLIDO = 1 linha rosa ou NENHUMA linha**  
É preciso **fazer o teste novamente**. Comece novamente do início usando um novo tubo, esfregaço e tira de teste. Se obtiver 2 resultados inválidos, ligue para 1-833-784-2588.