

如何进行 COVID-19 测试




使用 QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

关于

这是对 QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test 试剂盒的简化指南。有关详尽信息，请参考试剂盒中的说明书和病人情况表。本产品获有美国药物管理局(FDA)紧急使用授权。



有关如何进行测试的视频，请访问
quickvueathome.com/#video_testkit-2

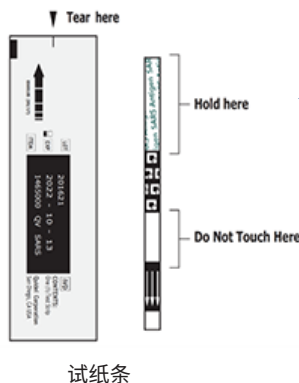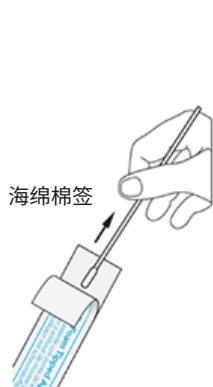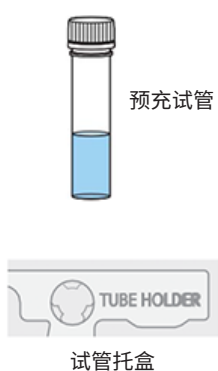


试剂盒里有什么？

预充试管
试管托盒
海绵棉签
试纸条
说明书
病人情况表

你还需要什么？

手表或计时器(不含在内)。
对时间的准确把握对这项测试非常重要！

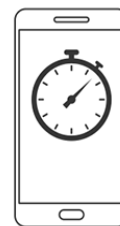

开始测试


洗净双手，将试剂盒放在一个平坦、干净的台面上。确保房间里有良好的光线。如果你要对另一个人进行测试，请佩戴口罩。打开试剂盒，确保上面列出的所有物品都在那里。拿出你的计时器或手表，按照另一侧的步骤说明进行操作。



进行测试

1

拿出一个试管拧下盖子, 将试管放入试管托盒。

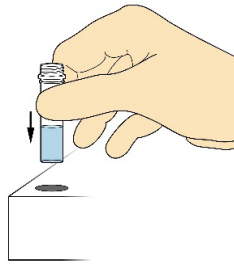

不要接触棉签头。


2

撕开棉签的包装纸。不要接触棉签头。




3

将棉签插入一个鼻孔中约1/2至3/4英寸, 在鼻孔内壁周围至少摩擦4次。使用相同的棉签, 在另一个鼻孔重复动作。这将需要大约15秒钟。

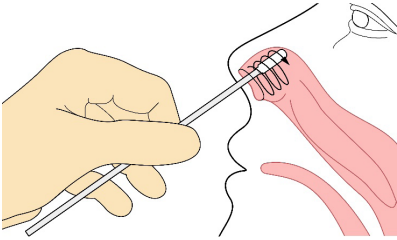


4

从鼻腔中获取样本后, 立即将棉签放入拧开的试管中。确保棉签接触到试管的底部。搅动棉签3或4次。

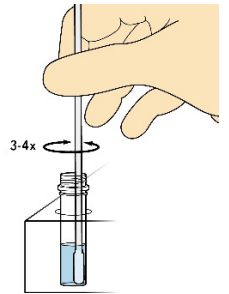


5

将棉签留在试管中至少1分钟。(使用计时器或手表!) 如果你将棉签留在试管中的时间过短或过长, 可能会出现错误的结果。

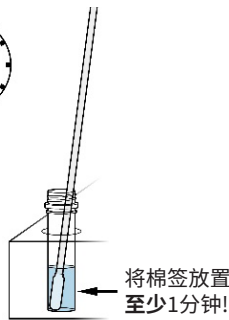

6

1分钟后, 将棉签从试管中取出, 将棉签头在试管壁上擦挤, 尽可能多地挤出液体。扔掉棉签。

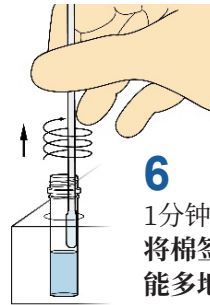


7

小心地打开试纸条袋, 将试纸条放入拧开的试管中, 箭头朝下。将试纸条放在试管中10分钟。(使用计时器或手表!)




将试纸条放置在至少10分钟内。

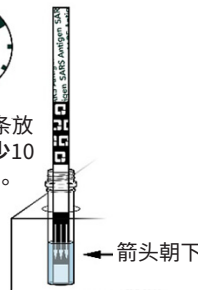

8

10分钟后, 将试纸条从试管中取出, 放在一个光线良好的平面上。立即阅读试纸条! 如果你等待超过5分钟再读, 你可能得到错误或无效的结果。

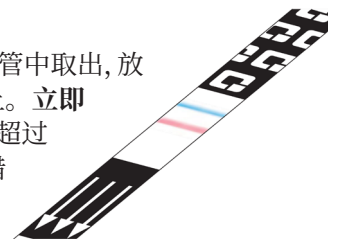

读取你的测试结果

有三种可能的测试结果。阳性、阴性或无效 (即不能用的测试)。

			<p>阳性结果 = 1 粉红色线 + 1 蓝色线 你很可能患有COVID-19。你应该进行自我隔离。如果你有令你难受或担忧的症状, 请联系你的医疗服务提供者。</p>		<p>阴性结果 = 1 条蓝色线 你不太可能感染COVID-19。但如果你有令你难受或担忧的症状, 请联系你的医疗服务提供者。</p>			<p>无效结果 = 1 粉红色线或无线 你需要做一个新的测试。使用新的试管、棉签和试纸条, 从头开始。对于2个无效的结果, 请致电1-833-784-2588。</p>
--	---	---	--	---	--	---	---	---